



<http://www.gatan.com/> にアクセス。

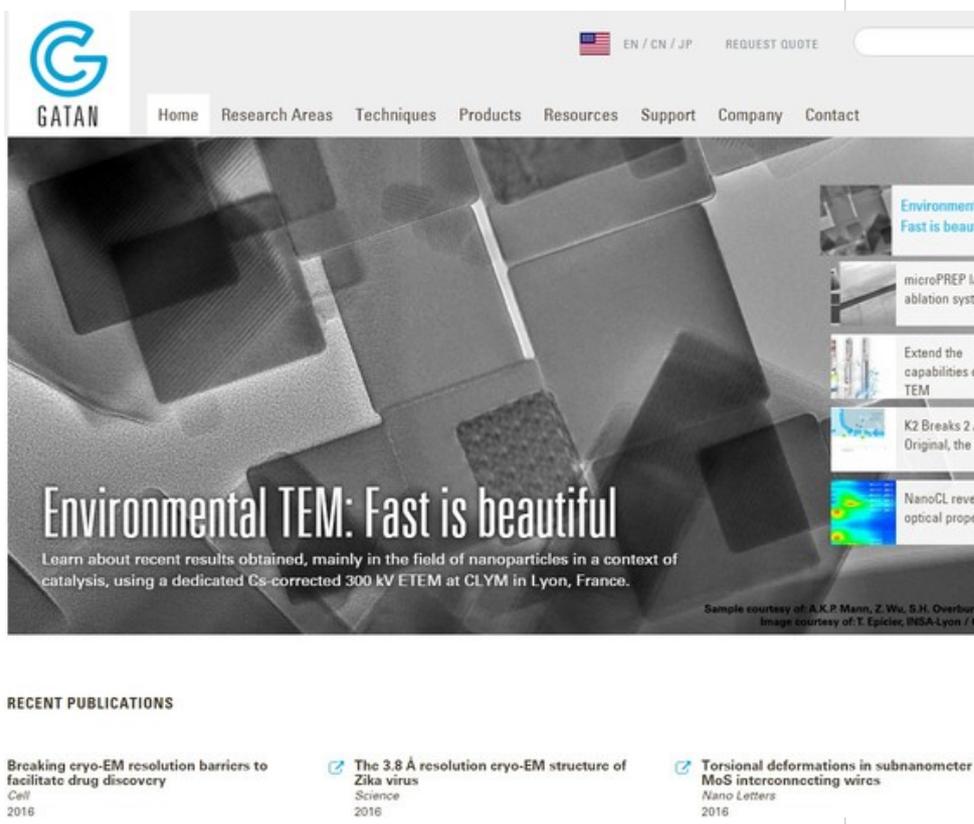

画面上部のメニューから
Support -> Software を選択


要は以下のアドレスへアクセス。

<http://www.gatan.com/resources/software>

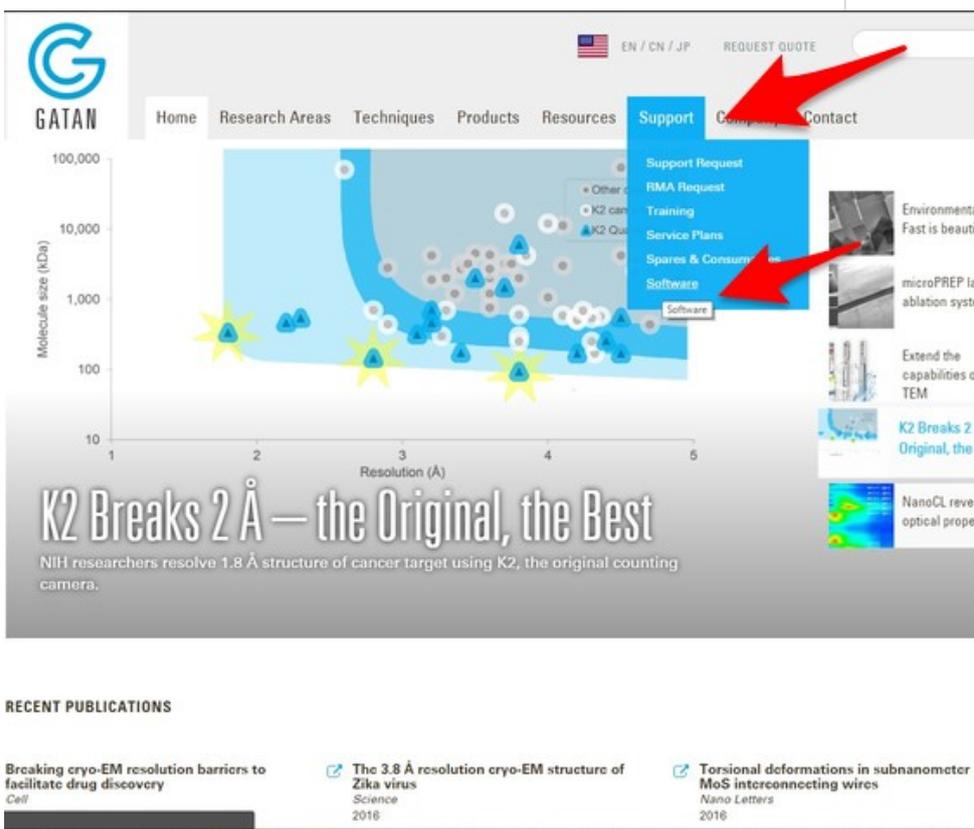

FREE OFFLINE SOFTWARE 欄の
View Page を選択。


要は以下のアドレスへアクセス。
<http://www.gatan.com/products/tem-analysis/gatan-microscopy-suite-software>

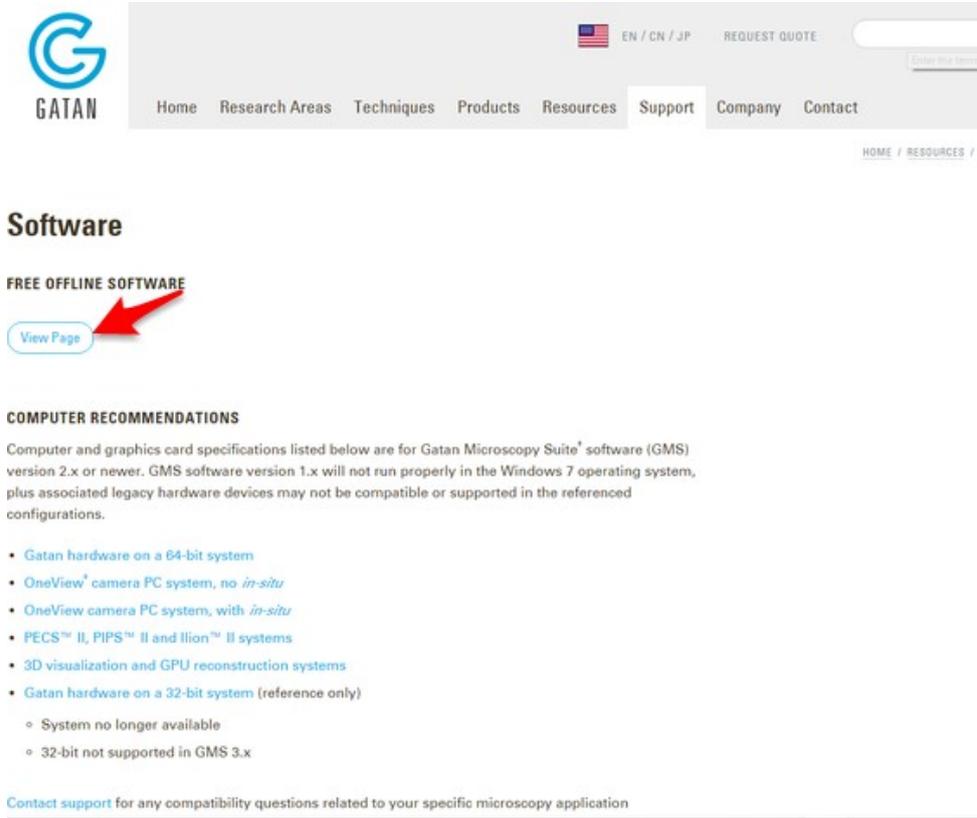

The screenshot shows the Gatan website's 'Software' page. At the top, there is a navigation bar with the Gatan logo and links for Home, Research Areas, Techniques, Products, Resources, Support, Company, and Contact. Below the navigation bar, the 'Software' section is titled. Underneath, there is a 'FREE OFFLINE SOFTWARE' section with a 'View Page' button highlighted by a red arrow. Below this, there is a 'COMPUTER RECOMMENDATIONS' section with a paragraph of text and a bulleted list of hardware specifications. At the bottom of this section, there is a link for 'Contact support for any compatibility questions related to your specific microscopy application'.

Download GMS 3を選択

要は以下のアドレスへアクセス。
<http://www.gatan.com/installation-instructions>

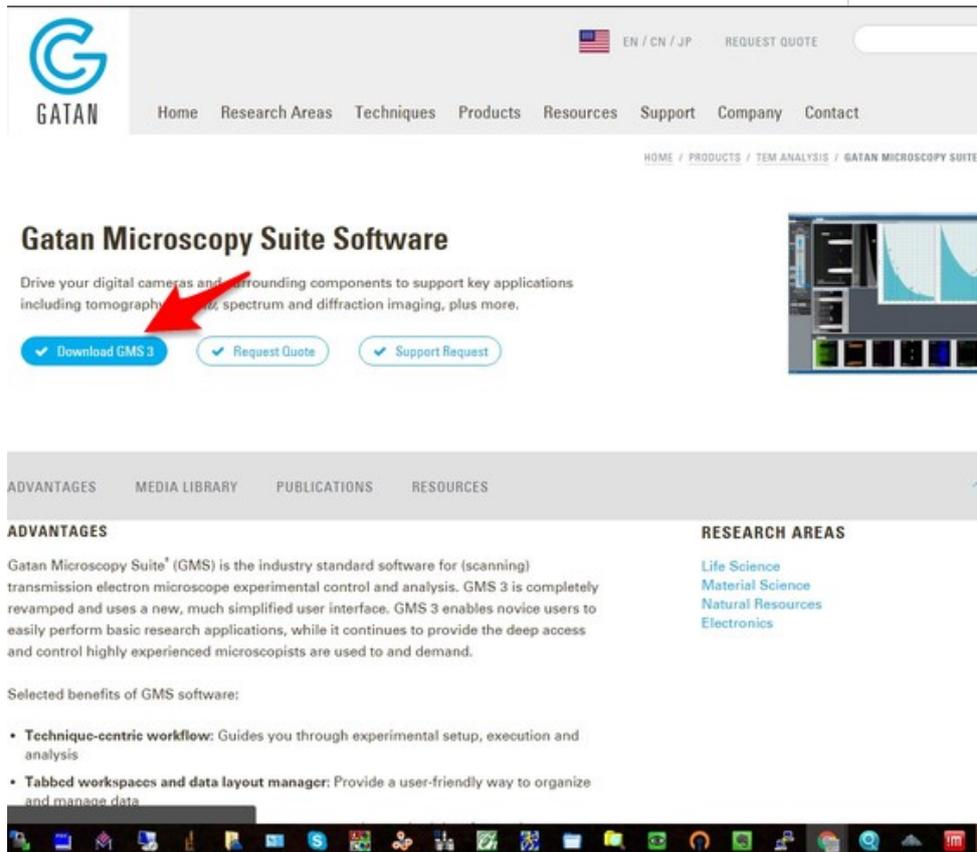

The screenshot shows the Gatan website's 'Gatan Microscopy Suite Software' page. At the top, there is a navigation bar with the Gatan logo and links for Home, Research Areas, Techniques, Products, Resources, Support, Company, and Contact. Below the navigation bar, the 'Gatan Microscopy Suite Software' section is titled. Underneath, there is a paragraph of text and three buttons: 'Download GMS 3', 'Request Quote', and 'Support Request'. The 'Download GMS 3' button is highlighted with a red arrow. Below this, there is a 'RESEARCH AREAS' section with a list of categories: Life Science, Material Science, Natural Resources, and Electronics. At the bottom of the page, there is a 'Selected benefits of GMS software:' section with a bulleted list of features.

始めにライセンスを取得します。
ここでは
GMS 2 -32bit版
の場合を説明します。
他のバージョンの場合は適宜読み替えてください。

要は以下のアドレスへアクセス。

<http://www.gatan.com/datasheets/gms-2-software-registration-32-bit>

必要事項を記入して Submit


Submit するとすぐにライセンスファイルがダウンロードされます。



先ほどのファイルを解凍して LicenseInstaller.exeを起動します。

名前	更新日時	種類	サイズ
autorun.inf	2010/06/21 7:57	セットアップ情報	1 KB
GATAN_FREE Offline 32-Bit Suites.glc	2011/08/02 11:12	GLC ファイル	1 KB
GATAN_FREE Offline 32-Bit Suites.txt	2011/08/02 11:12	テキストドキュメント	1 KB
Interop.Scripting.dll	2011/08/02 12:19	アプリケーション拡張	32 KB
LicenseInstaller.exe	2011/08/02 12:19	アプリケーション	34 KB
Read-me.pdf	2011/08/02 12:22	PDF Document	76 KB

Install Licences をクリックするとFree-offline版の Licenseがインストールされます。

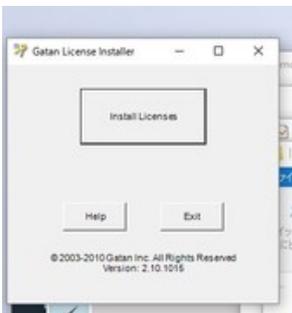

引き続き、GMS本体のダウンロードを行います。

<http://www.gatan.com/installation-instructions>

にアクセスし、画面最下部にある、GMS SOFTWARE INSTALLER を選択します。

要は、以下のアドレスへアクセスします。

<ftp://ftp.gatan.com/pub/software/PC/>

Installation Instructions

INSTRUCTIONS

[GMS 3](#) [GMS 2](#)

GMS 3 LICENSES

Gatan Microscopy Suite® (GMS) 3 software is only available in 64-bit, and the offline version is supported on Windows 7, 8.1, and 10. To download a license, press the desired button. Once you obtain the license, select the Download button to access the installer on the FTP site.

[GMS 3](#) [GMS 3 - OneView IS](#) [GMS 3 - K2 IS](#)

GMS 2 LICENSES

GMS 2 software is available in 32- and 64-bit versions, and is only supported on Windows 7. To download a license, press the desired button. Once you obtain the license, select the Download button to access the installer on the FTP site.

[GMS 2 - 64-Bit](#) [GMS 2 - 32-Bit](#)

GMS SOFTWARE INSTALLER

[Download](#)

FTPサーバに接続されるので、該当するバージョンのインストールファイルをダウンロードします。

ここでは、GMS_2_3_2_32-Bit.exe を選択します。

要は以下のアドレスへアクセスします。GMSが更新されるとファイル名も変更されるので、必ずサイトを確認して最新版をダウンロードしてください。

ftp://ftp.gatan.com/pub/software/PC/GMS_2_3_2_32-Bit.exe

インストールファイルは非常に大きいため、所内からアクセスした場合、上手くダウンロードできなかったり、非常に時間がかかることがあります。

その場合は、所外からアクセスするか、お問い合わせください。ダウンロード済みのイメージファイルをお渡しします。

ダウンロードしたファイルを実行して、GMSをインストールします。

FTP Directory: <ftp://anonymous@ftp.gatan.com/pub/software/PC/>

[UP TOP](#)

```
2016/06/25 15:43      4096 [DIR] Archive
2015/06/18 00:00    1495812 GMS 2.3.2 Patch 1.1 (6113) - dose fractionation acquisition with K2 Base camera does not complete.zip
2015/10/05 00:00     363870 GMS 2.3.2 Patch 1.2 (5778) - 31FW Detector calibration does not complete.zip
2015/05/11 00:00    191526504 GMS 2.3.2 32-bit.exe
2015/05/11 00:00    1279542196 GMS 2.3.2 64-bit.exe
2015/05/11 00:00     1402040 GMS 2.3.2 LicenseInstaller.exe
2016/07/05 15:06     1402040 GMS 3.1.1 LicenseInstaller.exe
2016/06/25 15:44 1939051296 GMS 3.1.1 32-bit.exe
2015/11/20 00:00      4467 INFORMATION ON THIS FOLDER CONTAINS.txt
2016/05/12 00:00    2914201 GMS3.1LicenseInstaller.exe
```